

THE

Natrelle™

Produktkatalog

COLLECTION

Brustimplantate & Gewebeexpander



Einzigartige *F*rauen verdienen
individuelle *L*ösungen

Inhalt

1 Informationen zu *Natrelle*™

- 1 Neue *Natrelle*™ Verpackung
- 2 Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen
- 4 *Natrelle*™ Qualität, Auswahl, Zufriedenheit
- 8 Das TruForm™ Versprechen
- 10 BioDIMENSIONAL™ Planungssystem

11 *Natrelle*™ INSPIRA™ Runde Implantate-Matrix

- 14 *Natrelle*™ INSPIRA™ – Texturierte Implantate
- 17 *Natrelle*™ INSPIRA™ – Glatte Implantate

19 *Natrelle*™ 410 Anatomische Implantate-Matrix

- 22 *Natrelle*™ 410 – Low projection
- 23 *Natrelle*™ 410 – Moderate projection
- 24 *Natrelle*™ 410 – Full projection
- 25 *Natrelle*™ 410 – Extra full projection

27 *Natrelle*™ 510 Anatomische Dual-Gel Implantate

- 30 *Natrelle*™ 510 – Für individuelle Patientenbedürfnisse

31 Messimplantate, die The *Natrelle*™ Collection unterstützen

- 34 Messimplantate für *Natrelle*™ INSPIRA™ Implantate
- 36 Messimplantate für *Natrelle*™ 410 Implantate


39 Rekonstruktions-Lösungen

- 39 *Natrelle*™ 133 – Zweizeitige Rekonstruktion mit anatomischem Gewebeexpander
- 44 *Natrelle*™ 133 – Variable projection
- 45 *Natrelle*™ 133 – Extra full projection
- 47 *Natrelle*™ 150 – Einzeitige Rekonstruktion mit anatomischem PermanentExpander

51 Mit Kochsalzlösung gefüllte Implantate

52 Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Instruktionen für die Wiederaufbereitung

53 The *Natrelle*™ Collection – Wichtige Information

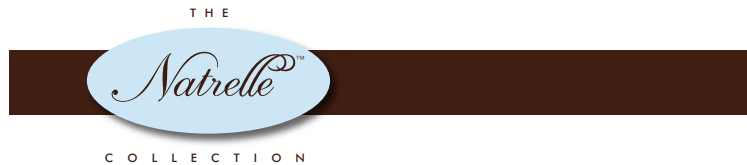

Neue Natrelle™-Verpackung



Gleiche Premiumqualität –
dynamischerer Name

- Der letzte Schritt, der den Übergang von der gut angesehenen Marke McGhan™ komplettiert, um nun die gesamte Angebotspalette unter einem Namen zusammenzuführen:
The Natrelle™ Collection.
- Aufgebaut nach exakten Standards unterliegen Implantate aus der Natrelle™ Collection zahlreichen Qualitätsprüfungen. Diese liegen weit über den geforderten Prüfungen, um Ihnen Implantate von hervorragender Qualität anbieten zu können.
- Minimale Änderungen zu Ihren bisherigen Bestell-Gewohnheiten *

* Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.



Über 70% der Frauen sind an der Form und Symmetrie ihrer Brüste interessiert, nicht nur an der Größe.¹

Die Natrelle™ Collection trägt der Tatsache Rechnung, dass jede Frau einzigartig ist und eine individuelle Lösung verdient.



T H E



C O L L E C T I O N

Mit der breiten Palette qualitativ hochwertiger runder und anatomischer Brustimplantate von Natrelle™ können Sie die gewünschte Form und eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Die bewährte Technologie trägt zu einer niedrigen Komplikationsrate bei.²


Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Vertrauen in *Qualität**E*inzigartige BIOCELL™-Texturierung

- Fördert die Gewebehaftung ³
- Verbessert die Stabilität für eine ausgezeichnete Passform ⁴
- Geringe Häufigkeit von Kapselkontrakturen ⁵

*E*inzigartige Hüllenstruktur

- 360° INTRASHIEL™ Barrierschicht (inkl. der Patchfläche) *minimiert die Diffusion von Silikongel* ⁶
- Qualitativ hochwertige Silikonschichten *für eine ausgezeichnete Hüllenintegrität*
- Patentierter Patchverschluss* *für eine ausgezeichnete Belastbarkeit des Implantats*

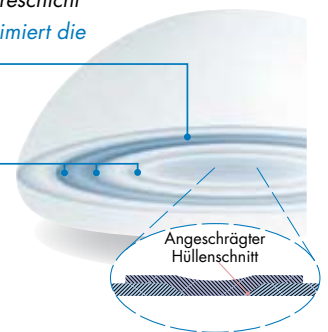

Grafische Darstellung – nicht maßstabsgetreu

*E*inzigartige Form-KontrolleDas **TruForm™** Versprechen

- *Kontrolliert die finale Brustform* ²
- *Ermöglicht langanhaltende Operationsergebnisse* ^{2, 5, 7}

*B*ekanntes Sicherheitsprofil

Trägt zur bekannten lang anhaltenden Sicherheit und zur ästhetischen post-operativen Brustform bei ²

* Patent # 6,074,421

THE

Natrella™

COLLECTION

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit

Eine Lösung für individuelle Ergebnisse

- Eine noch größere Implantatauswahl um die gewünschte Form zu erreichen

Natrella™ INSPIRA™	 NEU: ERWEITERTE AUSWAHL	Neu 5 Projektionen, 2 Gelooptionen: TruForm ® (Responsive) TruForm ® (Soft Touch™) 2 Hüllenooptionen: BIOCELL™ texturiert oder glatt	334 Implantat- optionen*
Natrella™ 410™		12 anatomische Formen (3 Höhen und 4 Projektionen) 2 formstabile Gelooptionen: TruForm ® (Soft Touch™) TruForm ® (Cohesive) BIOCELL™ texturiert	205 Implantat- optionen
Natrella™ 510™		3 Höhen Einzigartiges formstabil TruForm ® BIOCELL™ texturiert	39 Implantat- optionen
mit Silikongel gefüllte Messimplantate für Natrella™ Implantate	 Posterior view	52 Optionen für Natrella™ 410 51 Optionen für Natrella™ INSPIRA™** Sterile Lieferung Bis zu 10 mal resterilisierbar ³ Glatte Oberfläche	103 Optionen für mit Silikongel gefüllte Mess- implantate*
Natrella™ 133™		3 Höhen Variable and Extra Full Projektionen Auffüllbares temporäres Hilfsmittel BIOCELL™ texturiert	42 Gewebe- Expander- optionen
Natrella™ 150™		2 Höhen Doppel-Lumen (Silikon und Kochsalzlösung) BIOCELL™ texturiert	14 Permanent- Expander- optionen

Über 760
Optionen†

- Auswahlmöglichkeit der **TruForm**™ Gele als Hilfe um das gewünschte Aussehen und Anfühlen zu erzielen (siehe Seite 8)

† inklusive runder und anatomischer Kochsalzoptionen

* Erhältlich ab September 2010: Natrella™ INSPIRA™ Low Plus Projection glatte Implantate und Low Plus Projection Messimplantate

Langfristige Patientenzufriedenheit

- Hohe Zufriedenheit* in allen Bereichen mit der Brustoperation nach 3 Jahren⁴

98%

Augmentation

Rekonstruktion

94%

90%

Revisions-
AugmentationRevisions-
Rekonstruktion

93%

- Ausgezeichnete langfristige Patientenzufriedenheit

● 97%** bis zu 9 Jahren⁹

- Bis zu 11 Jahren nach der Operation berichten die meisten Patientinnen von Verbesserungen ihres Selbstbewusstseins, der Wahrnehmung ihres Körpers, des Gefühls beim Kleidertragen, der persönlichen Ausstrahlung und Attraktivität¹⁰

* Zufrieden oder sehr zufrieden mit den Implantaten auf einer Skala von 1 bis 5

** angegeben, dass die Brustaugmentation vorteilhaft war



Einzigartige Frauen verdienen
individuelle Lösungen

THE

Natrelle™

COLLECTION

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit

Das TruForm™ Versprechen

Unsere moderne Angebotspalette an TruForm™ Gelimplantaten vermittelt einen ästhetischen und optischen Eindruck, der sich an den individuellen Bedürfnissen jeder Frau messen lassen kann.

THE

Natrelle™

COLLECTION

TruForm™

- Vier Gelooptionen
- Einfache, numerische Messskala
- Individuelle Auswahlmöglichkeiten

Verfügbar für...

TruForm™ 1

- Traditionell weiches Kohäsivgel
- Sehr nachgiebig, modellierbar in die gewünschte Form

Natrelle™

INSPIRA™



TruForm™ 2

- Formstabiles Kohäsivgel
- Natürliche Anmutung mit zusätzlicher Formstabilität

Natrelle™

INSPIRA™



Natrelle™

410



TruForm™ 3

- Das originale formstabile Kohäsivgel
- Sehr hohe Formstabilität

Natrelle™

410



TruForm™ Dual

- Spezielle Kombination von zwei formstabilen Gelen, TruForm™ 3 und eines festeren Kohäsivgels im vorderen Teilbereich

Natrelle™

510



TruForm™ Gel
bezeichnungen
Frühere Gel-
bezeichnungen

	TruForm™ 1	TruForm™ 2	TruForm™ 3	TruForm™ Dual Gel
	Responsive	Soft Touch™	Cohesive	Dual Gel

Steigende Festigkeit

- Kontrolle über die finale Brustform²
 - ✓ Gleichmäßige Verteilung des Gels in der ganzen Hülle in jeder Position
 - ✓ Optimierte Gelfüllung
 - ✓ Ansprechende Anmutung der Brustform²
- Sehr gute, lang anhaltende Formstabilität^{2, 5, 7}
 - ✓ Lang anhaltender Erhalt der Brustform^{2, 7}
 - ✓ Aufrechterhaltung der Fülle des oberen Pols⁷
 - ✓ Geringe Dehnung des Weichteilgewebes⁷
- Ausgezeichnete Lebensdauer und sehr ästhetische Ergebnisse²
 - ✓ Abnehmende Wahrscheinlichkeit postoperativer Faltenbildung²
 - ✓ Reduzierte Wahrscheinlichkeit erheblicher Kapselkontrakturen²
 - ✓ Reduziertes Risiko von Implantatrupturen²

Zufriedenheit mit Natrelle™

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

BioDIMENSIONAL™ Planungssystem

Das BioDIMENSIONAL™ Planungssystem wurde von John B. Tebbetts, einem Arzt aus Dallas, Texas, inspiriert, der während seiner gesamten Berufslaufbahn nach Möglichkeiten suchte, bei der ästhetischen Brustvergrößerung vorhersehbare Ergebnisse zu planen und zu gewährleisten.

*S*chritte für die BioDIMENSIONAL™-Planung

- 1 Beginnen Sie mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der Anatomie und der Brust/Thorax-Statur der Patientin, um die zahlreichen Faktoren einzubeziehen, die sich auf die Ästhetik auswirken können
- 2 Besprechen und beurteilen Sie die Wünsche der Patientin und vergleichen Sie diese mit den anatomischen Gegebenheiten
- 3 Entwickeln Sie einen Ablaufplan, der zur Erfüllung der Wünsche der Patientin führt. Den Patientinnen wird nahegelegt, eher die natürlichen Dimensionen und die Form der Brust im Auge zu behalten, als allein das Volumen.

BioDIMENSIONAL™ Planungsansatz:

- ✓ Bewährter und präziser Planungsansatz
- ✓ Basierend auf realen Abmessungen und nicht nur auf dem Volumen.
- ✓ Anwendungsfreundliche Abmessungstechniken
- ✓ Leicht reproduzierbares Ergebnis
- ✓ Individuelle Implantate für jede Patientin

Dimensionen bestimmen das Volumen, nicht umgekehrt.

(i) **Breite**
(ii) **Höhe** = **VOLUMEN**
(iii) **Projektion**

Die BioDIMENSIONAL™-Planung und die Natrelle™ Collection ermöglichen individuelle Lösungen.



THE

Natrelle™ INSPIRA™

Natrelle™

RUNDE IMPLANTATE

COLLECTION

*R*unde Implantate bieten individuelle
Lösungen für hohe
Patientenzufriedenheit



Einzigartige *F*rauen verdienen
individuelle *L*ösungen

THE

Natrelle™

COLLECTION

Natrelle™ INSPIRA™

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit


Vertrauen in Qualität

- Optimierte Gelfüllung für minimale Faltenbildung⁷
- Unsere einzigartige BIOCELL™-Texturierung trägt zu einer geringen Kapselkontrakturrate bei⁵
- 360° INTRASHIEL™-Barrierschicht minimiert die Diffusion von Silikongel⁶
- Hohe Hüllenintegrität durch Silikon-Elastomer Schichten

Zufriedenheit mit Natrelle™

Eine Lösung für individuelle Ergebnisse

- Eine noch umfangreichere Angebotspalette an Profilen, Geltypen und Hüllenarten

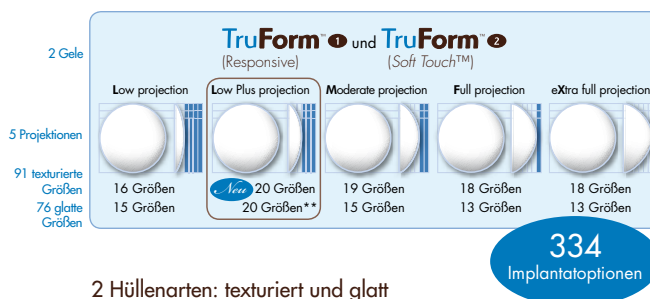

2 Hüllenarten: texturiert und glatt

2 Geloptionen: TruForm® (Responsive) und TruForm® (Soft Touch™)

5 Projektionen

** Low Plus Projection glatte Implantate erhältlich ab September 2010

- Einfach zu behalten:
 - Gleichmäßiges Verhältnis von Projektion zu Breite, mit logischen Intervallen zwischen den einzelnen Größen
 - Für nahezu jede vorhandene Breite bietet Natrelle™ INSPIRA™ 5 Profile in 2 Geltypen[†]
- Mit Silikongel gefüllte Messimplantate als praktische intraoperative Hilfestellung für die Taschengröße. Verfügbar in den am häufigsten verwendeten Natrelle™ INSPIRA™ Profilen und Größen (siehe Seite 31)

[†] Für alle Produkte mit ganzen und halben cm-Durchmesser

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Natrelle™ INSPIRA™ - Texturierte Implantate

TRL/TSL		Low projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-TRL110	N-TSL110	110	10.0	1.9
N-TRL125	N-TSL125	125	10.5	2.0
N-TRL140	N-TSL140	140	11.0	2.0
N-TRL170	N-TSL170	170	11.5	2.2
N-TRL200	N-TSL200	200	12.0	2.4
① N-TRL230	N-TSL230	230	12.5	2.5
② N-TRL260	N-TSL260	260	13.0	2.6
③ N-TRL290	N-TSL290	290	13.5	2.7
④ N-TRL320	N-TSL320	320	14.0	2.8
⑤ N-TRL350	N-TSL350	350	14.25	2.9
⑥ N-TRL380	N-TSL380	380	14.5	3.0
⑦ N-TRL410	N-TSL410	410	15.0	3.1
N-TRL460	N-TSL460	460	15.5	3.2
N-TRL510	N-TSL510	510	16.0	3.4
N-TRL560	N-TSL560	560	16.5	3.5
N-TRL610	N-TSL610	610	17.0	3.6

TRLP/TSLP		Low Plus projection			NEU
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)	
N-TRLP125	N-TSLP125	125	9.5	2.5	
⑧ N-TRLP145	N-TSLP145	145	10.0	2.6	
⑨ N-TRLP165	N-TSLP165	165	10.5	2.7	
⑩ N-TRLP190	N-TSLP190	190	11.0	2.8	
⑪ N-TRLP205	N-TSLP205	205	11.25	2.9	
⑫ N-TRLP220	N-TSLP220	220	11.5	3.0	
⑬ N-TRLP235	N-TSLP235	235	11.75	3.1	
⑭ N-TRLP250	N-TSLP250	250	12.0	3.1	
⑮ N-TRLP265	N-TSLP265	265	12.25	3.2	
⑯ N-TRLP280	N-TSLP280	280	12.5	3.3	
⑰ N-TRLP300	N-TSLP300	300	12.75	3.3	
⑱ N-TRLP320	N-TSLP320	320	13.0	3.4	
⑲ N-TRLP340	N-TSLP340	340	13.25	3.5	
N-TRLP360	N-TSLP360	360	13.5	3.5	
N-TRLP400	N-TSLP400	400	14.0	3.6	
N-TRLP440	N-TSLP440	440	14.5	3.8	
N-TRLP490	N-TSLP490	490	15.0	3.9	
N-TRLP540	N-TSLP540	540	15.5	4.0	
N-TRLP590	N-TSLP590	590	16.0	4.2	
N-TRLP640	N-TSLP640	640	16.5	4.3	

Natrelle™ INSPIRA™ - Texturierte Implantate

TRM/TSM		Moderate projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-TRM140	N-TSM140	140	9.5	3.0
⑳ N-TRM175	N-TSM175	175	10.0	3.3
㉑ N-TRM210	N-TSM210	210	10.5	3.5
㉒ N-TRM240	N-TSM240	240	11.0	3.7
㉓ N-TRM255	N-TSM255	255	11.25	3.8
㉔ N-TRM275	N-TSM275	275	11.5	3.9
㉕ N-TRM295	N-TSM295	295	11.75	3.9
㉖ N-TRM310	N-TSM310	310	12.0	4.0
㉗ N-TRM330	N-TSM330	330	12.25	4.1
㉘ N-TRM345	N-TSM345	345	12.5	4.2
㉙ N-TRM360	N-TSM360	360	12.75	4.2
㉚ N-TRM375	N-TSM375	375	13.0	4.3
㉛ N-TRM405	N-TSM405	405	13.25	4.4
N-TRM445	N-TSM445	445	13.5	4.5
N-TRM485	N-TSM485	485	14.0	4.6
N-TRM520	N-TSM520	520	14.5	4.8
N-TRM600	N-TSM600	600	15.0	4.9
N-TRM640	N-TSM640	640	15.5	5.0
N-TRM685	N-TSM685	685	16.0	5.2

TRF/TSF		Full projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-TRF180	N-TSF180	180	9.5	4.0
㉜ N-TRF220	N-TSF220	220	10.0	4.2
㉝ N-TRF240	N-TSF240	240	10.5	4.3
㉞ N-TRF265	N-TSF265	265	11.0	4.5
㉟ N-TRF295	N-TSF295	295	11.25	4.6
㊱ N-TRF325	N-TSF325	325	11.5	4.7
㊲ N-TRF335	N-TSF335	335	11.75	4.8
㊳ N-TRF345	N-TSF345	345	12.0	4.9
㊴ N-TRF365	N-TSF365	365	12.25	5.0
㊵ N-TRF385	N-TSF385	385	12.5	5.1
㊶ N-TRF415	N-TSF415	415	12.75	5.2
㊷ N-TRF450	N-TSF450	450	13.0	5.3
N-TRF485	N-TSF485	485	13.25	5.4
N-TRF520	N-TSF520	520	13.5	5.5
N-TRF560	N-TSF560	560	14.0	5.7
N-TRF605	N-TSF605	605	14.5	5.8
N-TRF695	N-TSF695	695	15.0	6.0
N-TRF745	N-TSF745	745	15.5	6.1

○ Mit Silikongel gefüllte Messimplantate verfügbar
(siehe Seiten 34 und 35)

Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ INSPIRA™ - Texturierte Implantate

TRX/TSX		eXtra-full projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-TRX205	N-TSX205	205	9.5	4.4
④③ N-TRX255	N-TSX255	255	10.0	4.8
④④ N-TRX285	N-TSX285	285	10.5	5.0
④⑤ N-TRX310	N-TSX310	310	11.0	5.4
④⑥ N-TRX340	N-TSX340	340	11.25	5.5
④⑦ N-TRX375	N-TSX375	375	11.5	5.7
④⑧ N-TRX400	N-TSX400	400	11.75	5.8
④⑨ N-TRX420	N-TSX420	420	12.0	5.9
⑤⑩ N-TRX445	N-TSX445	445	12.25	6.0
⑤⑪ N-TRX470	N-TSX470	470	12.5	6.2
N-TRX495	N-TSX495	495	12.75	6.2
N-TRX525	N-TSX525	525	13.0	6.3
N-TRX545	N-TSX545	545	13.25	6.3
N-TRX560	N-TSX560	560	13.5	6.4
N-TRX615	N-TSX615	615	14.0	6.5
N-TRX700	N-TSX700	700	14.5	6.6
N-TRX750	N-TSX750	750	15.0	6.7
N-TRX800	N-TSX800	800	15.5	6.8



- N-TRL170
- N-TSL170



- N-TRL220
- N-TSL220



- N-TRM275
- N-TSM275



- N-TRF325
- N-TSF325



- N-TRX375
- N-TSX375

○ Mit Silikongel gefüllte Messimplantate verfügbar
(siehe Seiten 34 und 35)

Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ INSPIRA™ - Glatte Implantate*

SRL/SSL		Low projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-SRL110	N-SSL110	110	10.0	2.0
N-SRL140	N-SSL140	140	10.5	2.1
N-SRL170	N-SSL170	170	11.0	2.2
N-SRL200	N-SSL200	200	11.5	2.3
N-SRL230	N-SSL230	230	12.0	2.4
① N-SRL260	N-SSL260	260	12.5	2.5
② N-SRL290	N-SSL290	290	13.0	2.6
③ N-SRL320	N-SSL320	320	13.5	2.7
④ N-SRL350	N-SSL350	350	14.0	2.8
⑤ N-SRL380	N-SSL380	380	14.5	2.9
⑥ N-SRL410	N-SSL410	410	15.0	3.0
⑦ N-SRL460	N-SSL460	460	15.5	3.1
N-SRL510	N-SSL510	510	16.0	3.2
N-SRL560	N-SSL560	560	16.5	3.3
N-SRL610	N-SSL610	610	17.0	3.4

SRLP/SSLP		Low Plus profile†			NEU
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)	
N-SRLP125	N-SSLP125	125	9.5	2.5	
⑧ N-SRLP145	N-SSLP145	145	10.0	2.6	
⑨ N-SRLP165	N-SSLP165	165	10.5	2.7	
⑩ N-SRLP190	N-SSLP190	190	11.0	2.8	
⑪ N-SRLP205	N-SSLP205	205	11.25	2.9	
⑫ N-SRLP220	N-SSLP220	220	11.5	3.0	
⑬ N-SRLP235	N-SSLP235	235	11.75	3.1	
⑭ N-SRLP250	N-SSLP250	250	12.0	3.1	
⑮ N-SRLP265	N-SSLP265	265	12.25	3.2	
⑯ N-SRLP280	N-SSLP280	280	12.5	3.3	
⑰ N-SRLP300	N-SSLP300	300	12.75	3.3	
⑱ N-SRLP320	N-SSLP320	320	13.0	3.4	
⑲ N-SRLP340	N-SSLP340	340	13.25	3.5	
N-SRLP360	N-SSLP360	360	13.5	3.5	
N-SRLP400	N-SSLP400	400	14.0	3.6	
N-SRLP440	N-SSLP440	440	14.5	3.8	
N-SRLP490	N-SSLP490	490	15.0	3.9	
N-SRLP540	N-SSLP540	540	15.5	4.0	
N-SRLP590	N-SSLP590	590	16.0	4.2	
N-SRLP640	N-SSLP640	640	16.5	4.3	

† Erhältlich ab September 2010

○ Mit Silikongel gefüllte Messimplantate verfügbar (siehe Seiten 34 und 35)

● Mit Silikongel gefüllte Messimplantate für diesen Durchmesser verfügbar.
Ihre professionelle Einschätzung und Bewertung ist erforderlich, da Projektion und Größe differieren können. Für eine komplette Liste der verfügbaren Messimplantaten siehe Seite 34 und 35.

Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrella™ INSPIRA™ - Glatte Implantate*

SRM/SSM		Moderate projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-SRM140	N-SSM140	140	9.5	3.0
N-SRM170	N-SSM170	170	10.0	3.1
N-SRM190	N-SSM190	190	10.5	3.2
N-SRM205	N-SSM205	205	11.0	3.3
N-SRM235	N-SSM235	235	11.5	3.5
N-SRM270	N-SSM270	270	12.0	3.7
N-SRM300	N-SSM300	300	12.5	3.8
N-SRM365	N-SSM365	365	13.0	4.0
N-SRM400	N-SSM400	400	13.5	4.2
N-SRM470	N-SSM470	470	14.0	4.4
N-SRM505	N-SSM505	505	14.5	4.5
N-SRM545	N-SSM545	545	15.0	4.6
N-SRM580	N-SSM580	580	15.5	4.7
N-SRM620	N-SSM620	620	16.0	4.8
N-SRM755	N-SSM755	755	16.5	5.0

SRF/SSF		Full projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-SRF175	N-SSF175	175	9.5	3.7
N-SRF190	N-SSF190	190	10.0	3.8
N-SRF235	N-SSF235	235	10.5	4.0
N-SRF255	N-SSF255	255	11.0	4.2
N-SRF290	N-SSF290	290	11.5	4.5
N-SRF335	N-SSF335	335	12.0	4.7
N-SRF370	N-SSF370	370	12.5	4.8
N-SRF435	N-SSF435	435	13.0	4.9
N-SRF500	N-SSF500	500	13.5	5.1
N-SRF540	N-SSF540	540	14.0	5.3
N-SRF630	N-SSF630	630	14.5	5.6
N-SRF675	N-SSF675	675	15.0	5.8
N-SRF770	N-SSF770	770	15.5	6.0

SRX/SSX		eXtra-full projection		
TruForm® (Responsive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
N-SRX200	N-SSX200	200	9.5	4.2
N-SRX225	N-SSX225	225	10.0	4.5
N-SRX285	N-SSX285	285	10.5	4.8
N-SRX310	N-SSX310	310	11.0	5.1
N-SRX370	N-SSX370	370	11.5	5.4
N-SRX415	N-SSX415	415	12.0	5.7
N-SRX465	N-SSX465	465	12.5	5.9
N-SRX520	N-SSX520	520	13.0	6.0
N-SRX550	N-SSX550	550	13.5	6.1
N-SRX610	N-SSX610	610	14.0	6.2
N-SRX695	N-SSX695	695	14.5	6.4
N-SRX745	N-SSX745	745	15.0	6.5
N-SRX800	N-SSX800	800	15.5	6.7

● Mit Silikongel gefüllte Messimplantate für diesen Durchmesser verfügbar. Ihre professionelle Einschätzung und Bewertung ist erforderlich, da Projektion und Größe differieren können. Für eine komplette Liste der verfügbaren Messimplantaten siehe Seite 34 und 35.

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrella™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

THE



COLLECTION

Natrella™ 410

ANATOMISCHE IMPLANTATE

*Anatomische Brustimplantate –
Individuelle Lösungen fördern hohe
Patientenzufriedenheit*



*Einzigartige Frauen verdienen
individuelle Lösungen*

Vertrauen in Qualität

- Anatomisches Design für eine natürliche und wohl proportionierte Brustform^{2,5}
- Formstabilen Gel sichert lang anhaltend die Form bei geringen Komplikationsraten^{2,7}
- BIOCELL™-Texturierung verringert die Rotationsgefahr⁴ und trägt zu einer geringen Kapselkontrakturnrate bei⁵
- 360° INTRASHIEL™ Barrierschicht minimiert die Diffusion von Silikongel⁶
- Orientierungsmarkierungen unterstützen die visuelle und die taktile Platzierung innerhalb der Implantattasche*

Orientierungsmarken

* Seit Mai 2010 wird eine 3. Orientierungsmarkierung auf der Vorderseite von allen Natrelle™ 410er Implantaten platziert sein (unterhalb der untersten existierenden Markierung auf der Spitze) um die korrekte Platzierung des Implantats weiter zu unterstützen.

(Um die Einführung so glatt als möglich zu gestalten kann es sein, dass Sie Lieferungen erhalten, die eines oder beide Produkte enthalten.)

Zufriedenheit mit Natrelle™

Eine Lösung für individuelle Ergebnisse

	TruForm™ (Soft Touch™) und TruForm™ (Cohesive)			TruForm™ (Cohesive)
Height	Full Height	Low Projection FL 5 Größen	Moderate Projection FM 13 Größen	Full Projection FF 13 Größen
	Moderate Height	ML 5 Größen	MM 10 Größen	MF 13 Größen
	Low Height	LL 5 Größen	LM 5 Größen	LF 13 Größen
				eXtra full Projection FX 13 Größen MX 14 Größen LX 14 Größen

205 Implantatoptionen

12 anatomische Formen: 3 Höhen und 4 Projektionen

2 Geloptionen: TruForm™ (Soft Touch™) und TruForm™ (Cohesive)

- Mit Silikongel gefüllte Messimplantate als praktische intraoperative Hilfestellung für die Taschengröße. Verfügbar in den am meisten verwendeten Natrelle™ 410 Profilen und Größen (siehe Seite 31)

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Natrelle™ 410 - Low Projection

FL Full height/Low projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-FL100-140	N-ST-FL100-140	140	10.0	10.5	2.9
N-27-FL110-190	N-ST-FL110-190	190	11.0	11.5	3.1
N-27-FL115-220	N-ST-FL115-220	220	11.5	12.0	3.2
N-27-FL120-250	N-ST-FL120-250	250	12.0	12.5	3.4
N-27-FL130-320	N-ST-FL130-320	320	13.0	13.5	3.8

ML Moderate height/Low projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-ML100-125	N-ST-ML100-125	125	10.0	9.1	2.9
N-27-ML110-170	N-ST-ML110-170	170	11.0	10.1	3.1
N-27-ML115-195	N-ST-ML115-195	195	11.5	10.6	3.2
N-27-ML120-220	N-ST-ML120-220	220	12.0	11.1	3.4
N-27-ML130-285	N-ST-ML130-285	285	13.0	12.1	3.8

LL Low height/Low projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-LL105-135	N-ST-LL105-135	135	10.5	8.6	3.0
N-27-LL115-180	N-ST-LL115-180	180	11.5	9.6	3.2
N-27-LL120-210	N-ST-LL120-210	210	12.0	10.1	3.4
N-27-LL125-240	N-ST-LL125-240	240	12.5	10.5	3.6
N-27-LL135-300	N-ST-LL135-300	300	13.5	11.4	4.0

Natrelle™ 410 - Moderate Projection

FM Full height/Moderate projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-FM095-155	N-ST-FM095-155	155	9.5	10.0	3.4
52 N-27-FM100-180	N-ST-FM100-180	180	10.0	10.5	3.6
53 N-27-FM105-205	N-ST-FM105-205	205	10.5	11.0	3.8
54 N-27-FM110-235	N-ST-FM110-235	235	11.0	11.5	4.0
55 N-27-FM115-270	N-ST-FM115-270	270	11.5	12.0	4.2
56 N-27-FM120-310	N-ST-FM120-310	310	12.0	12.5	4.4
57 N-27-FM125-350	N-ST-FM125-350	350	12.5	13.0	4.6
58 N-27-FM130-395	N-ST-FM130-395	395	13.0	13.5	4.8
N-27-FM135-440	N-ST-FM135-440	440	13.5	14.0	5.0
N-27-FM140-500	N-ST-FM140-500	500	14.0	14.5	5.2
N-27-FM145-550	N-ST-FM145-550	550	14.5	15.0	5.4
N-27-FM150-605	N-ST-FM150-605	605	15.0	15.5	5.5
N-27-FM155-670	N-ST-FM155-670	670	15.5	16.0	5.6

MM Moderate height/Moderate projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-MM095-135	N-ST-MM095-135	135	9.5	8.6	3.4
N-27-MM100-160	N-ST-MM100-160	160	10.0	9.1	3.6
59 N-27-MM105-185	N-ST-MM105-185	185	10.5	9.6	3.8
60 N-27-MM110-215	N-ST-MM110-215	215	11.0	10.1	4.0
61 N-27-MM115-245	N-ST-MM115-245	245	11.5	10.6	4.2
62 N-27-MM120-280	N-ST-MM120-280	280	12.0	11.1	4.4
63 N-27-MM125-320	N-ST-MM125-320	320	12.5	11.6	4.6
64 N-27-MM130-360	N-ST-MM130-360	360	13.0	12.1	4.8
65 N-27-MM135-400	N-ST-MM135-400	400	13.5	12.5	5.0
66 N-27-MM140-450	N-ST-MM140-450	450	14.0	12.9	5.2

LM Low height/Moderate projection					
TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-27-LM100-140	N-ST-LM100-140	140	10.0	8.1	3.6
N-27-LM110-190	N-ST-LM110-190	190	11.0	9.1	4.0
N-27-LM115-220	N-ST-LM115-220	220	11.5	9.6	4.2
N-27-LM120-250	N-ST-LM120-250	250	12.0	10.1	4.4
N-27-LM130-320	N-ST-LM130-320	320	13.0	10.9	4.8

○ Mit Silikongel gefüllte Messimplantate verfügbar (siehe Seite 36)

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ 410 – Full Projection

FF		Full height/Full projection				
	TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
	N-27-FF095-160	N-ST-FF095-160	160	9.5	10.0	3.7
67	N-27-FF100-185	N-ST-FF100-185	185	10.0	10.5	4.0
68	N-27-FF105-220	N-ST-FF105-220	220	10.5	11.0	4.2
69	N-27-FF110-255	N-ST-FF110-255	255	11.0	11.5	4.4
70	N-27-FF115-290	N-ST-FF115-290	290	11.5	12.0	4.6
71	N-27-FF120-335	N-ST-FF120-335	335	12.0	12.5	4.8
72	N-27-FF125-375	N-ST-FF125-375	375	12.5	13.0	5.1
73	N-27-FF130-425	N-ST-FF130-425	425	13.0	13.5	5.2
	N-27-FF135-475	N-ST-FF135-475	475	13.5	14.0	5.3
	N-27-FF140-535	N-ST-FF140-535	535	14.0	14.5	5.6
	N-27-FF145-595	N-ST-FF145-595	595	14.5	15.0	5.8
	N-27-FF150-655	N-ST-FF150-655	655	15.0	15.5	6.1
	N-27-FF155-740	N-ST-FF155-740	740	15.5	16.0	6.2

MF		Moderate height/Full projection				
	TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
	N-27-MF095-140	N-ST-MF095-140	140	9.5	8.6	3.7
	N-27-MF100-165	N-ST-MF100-165	165	10.0	9.1	4.0
74	N-27-MF105-195	N-ST-MF105-195	195	10.5	9.6	4.2
75	N-27-MF110-225	N-ST-MF110-225	225	11.0	10.1	4.4
76	N-27-MF115-255	N-ST-MF115-255	255	11.5	10.6	4.6
	N-27-MF120-295	N-ST-MF120-295	295	12.0	11.1	4.8
77	N-27-MF125-335	N-ST-MF125-335	335	12.5	11.6	5.1
78	N-27-MF130-375	N-ST-MF130-375	375	13.0	12.1	5.2
79	N-27-MF135-420	N-ST-MF135-420	420	13.5	12.5	5.3
80	N-27-MF140-470	N-ST-MF140-470	470	14.0	12.9	5.6
	N-27-MF145-525	N-ST-MF145-525	525	14.5	13.2	5.8
	N-27-MF150-580	N-ST-MF150-580	580	15.0	13.6	6.1
	N-27-MF155-640	N-ST-MF155-640	640	15.5	13.9	6.2

LF		Low height/Full projection				
	TruForm® (Cohesive)	TruForm® (Soft Touch™)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
	N-27-LF095-125	N-ST-LF095-125	125	9.5	7.6	3.7
	N-27-LF100-150	N-ST-LF100-150	150	10.0	8.1	4.0
	N-27-LF105-175	N-ST-LF105-175	175	10.5	8.6	4.2
81	N-27-LF110-205	N-ST-LF110-205	205	11.0	9.1	4.4
82	N-27-LF115-240	N-ST-LF115-240	240	11.5	9.6	4.6
83	N-27-LF120-270	N-ST-LF120-270	270	12.0	10.1	4.8
84	N-27-LF125-310	N-ST-LF125-310	310	12.5	10.5	5.1
85	N-27-LF130-350	N-ST-LF130-350	350	13.0	10.9	5.2
	N-27-LF135-390	N-ST-LF135-390	390	13.5	11.4	5.3
86	N-27-LF140-440	N-ST-LF140-440	440	14.0	11.8	5.6
87	N-27-LF145-490	N-ST-LF145-490	490	14.5	12.2	5.8
	N-27-LF150-540	N-ST-LF150-540	540	15.0	12.6	6.1
	N-27-LF155-595	N-ST-LF155-595	595	15.5	13.0	6.2

Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ 410 – Extra Full Projection

FX		Full height/eXtra-full projection			
	TruForm® (Cohesive)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
88	N-27-FX095-185	185	9.5	10.0	4.6
89	N-27-FX100-215	215	10.0	10.5	4.9
90	N-27-FX105-245	245	10.5	11.0	5.1
91	N-27-FX110-280	280	11.0	11.5	5.3
92	N-27-FX115-315	315	11.5	12.0	5.5
93	N-27-FX120-360	360	12.0	12.5	5.7
94	N-27-FX125-410	410	12.5	13.0	6.0
95	N-27-FX130-450	450	13.0	13.5	6.1
	N-27-FX135-495	495	13.5	14.0	6.2
	N-27-FX140-560	560	14.0	14.5	6.5
	N-27-FX145-615	615	14.5	15.0	6.7
	N-27-FX150-690	690	15.0	15.5	7.0
	N-27-FX155-775	775	15.5	16.0	7.1

MX		Moderate height/eXtra-full projection			
	TruForm® (Cohesive)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
	N-27-MX095-165	165	9.5	8.6	4.6
96	N-27-MX100-195	195	10.0	9.1	4.9
97	N-27-MX105-225	225	10.5	9.6	5.1
98	N-27-MX110-255	255	11.0	10.1	5.3
99	N-27-MX115-290	290	11.5	10.6	5.5
100	N-27-MX120-325	325	12.0	11.1	5.7
101	N-27-MX125-370	370	12.5	11.6	6.0
102	N-27-MX130-410	410	13.0	12.1	6.1
103	N-27-MX135-445	445	13.5	12.5	6.2
	N-27-MX140-520	520	14.0	12.9	6.5
	N-27-MX145-550	550	14.5	13.2	6.7
	N-27-MX150-620	620	15.0	13.6	7.0
	N-27-MX155-685	685	15.5	13.9	7.1
	N-27-MX160-765	765	16.0	14.3	7.2

LX		Low height/eXtra-full projection			
TruForm® (Cohesive)	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)	
N-27-LX095-145	145	9.5	7.6	4.6	
N-27-LX100-175	175	10.0	8.1	4.9	
N-27-LX105-195	195	10.5	8.6	5.1	
N-27-LX110-225	225	11.0	9.1	5.3	
N-27-LX115-255	255	11.5	9.6	5.5	
N-27-LX120-290	290	12.0	10.1	5.7	
N-27-LX125-330	330	12.5	10.5	6.0	
N-27-LX130-365	365	13.0	10.9	6.1	
N-27-LX135-405	405	13.5	11.4	6.2	
N-27-LX140-455	455	14.0	11.8	6.5	
N-27-LX145-515	515	14.5	12.2	6.7	
N-27-LX150-570	570	15.0	12.6	7.0	
N-27-LX155-625	625	15.5	13.0	7.1	
N-27-LX160-685	685	16.0	13.4	7.2	

○ Mit Silikongel gefüllte Messimplantate verfügbar
(siehe Seiten 37 und 38)

THE



Natrella™ 510

ANATOMISCHE DUAL-GEL IMPLANTATE


COLLECTION

*E*inzigartige anatomische
Dual-Gel Implantate für
individuelle Patientenwünsche



*E*inzigartige *F*rauen verdienen
individuelle *L*ösungen

Vertrauen in Qualität

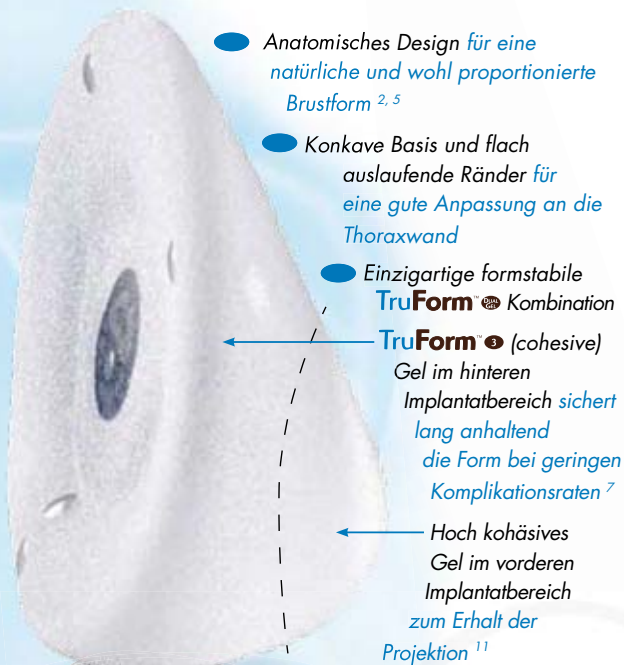

- BIOCELL™-Texturierung verringert die Rotationsgefahr ⁴ und trägt zu einer geringen Kapselkontrakturnrate bei ⁵
- 360° INTRASHIEL™-Barrierschicht minimiert die Diffusion des Silikongels ⁶
- Orientierungsmarkierungen unterstützen die visuelle und die taktile Platzierung innerhalb der Implantat-tasche

Eine ideale Lösung für:


Korrektur einer leicht ptotischen Brust ohne zusätzliche Narben

tubuläre Brüste

das Poland-Syndrom

eine dünne Gewebeabdeckung

die Brust-augmentation als auch für die Rekonstruktion

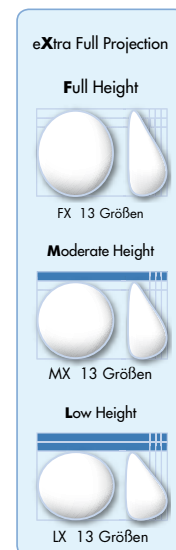

Zufriedenheit mit Natrelle™

Einzigartige **F**rauen verdienen individuelle **L**ösungen

Natrelle™ 510

Anatomische Dual-Gel Implantate

FX Full height/eXtra-full projection

TruForm™	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-510FX-165	165	9.5	10.0	4.4
N-510FX-190	190	10.0	10.5	4.7
N-510FX-210	210	10.5	11.0	4.9
N-510FX-250	250	11.0	11.5	5.1
N-510FX-280	280	11.5	12.0	5.3
N-510FX-310	310	12.0	12.5	5.5
N-510FX-350	350	12.5	13.0	5.6
N-510FX-400	400	13.0	13.5	5.9
N-510FX-435	435	13.5	14.0	6.0
N-510FX-495	495	14.0	14.5	6.3
N-510FX-545	545	14.5	15.0	6.4
N-510FX-595	595	15.0	15.5	6.8
N-510FX-630	630	15.5	16.0	7.0


MX Moderate height/eXtra-full projection

TruForm™	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-510MX-145	145	9.5	8.6	4.4
N-510MX-175	175	10.0	9.1	4.7
N-510MX-200	200	10.5	9.6	4.9
N-510MX-220	220	11.0	10.1	5.1
N-510MX-245	245	11.5	10.6	5.3
N-510MX-290	290	12.0	11.1	5.5
N-510MX-335	335	12.5	11.6	5.6
N-510MX-360	360	13.0	12.1	5.9
N-510MX-385	385	13.5	12.5	5.9
N-510MX-445	445	14.0	12.9	6.3
N-510MX-490	490	14.5	13.2	6.4
N-510MX-550	550	15.0	13.6	6.8
N-510MX-600	600	15.5	13.9	7.0

LX Low height/eXtra-full projection

TruForm™	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-510LX-130	130	9.5	7.6	4.4
N-510LX-155	155	10.0	8.1	4.7
N-510LX-185	185	10.5	8.6	4.9
N-510LX-205	205	11.0	9.1	5.1
N-510LX-230	230	11.5	9.6	5.3
N-510LX-275	275	12.0	10.1	5.5
N-510LX-305	305	12.5	10.5	5.7
N-510LX-330	330	13.0	10.9	5.9
N-510LX-365	365	13.5	11.4	6.0
N-510LX-425	425	14.0	11.8	6.3
N-510LX-475	475	14.5	12.2	6.4
N-510LX-530	530	15.0	12.6	6.8
N-510LX-575	575	15.5	13.0	7.0


Bei allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

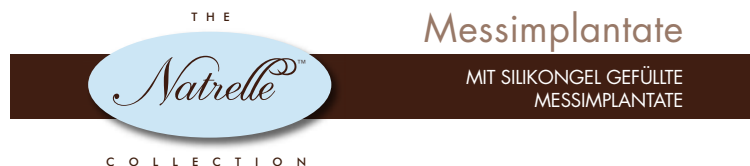

Messimplantate

MIT SILIKONGEL GEFÜLLTE
MESSIMPLANTATE

Eine große Angebotspalette von qualitativ hochwertigen runden und anatomischen mit Silikongel gefüllten Messimplantaten um die Übereinstimmung von Taschengröße und ausgewähltem Implantat zu prüfen und eine hohe Patientenzufriedenheit zu erreichen

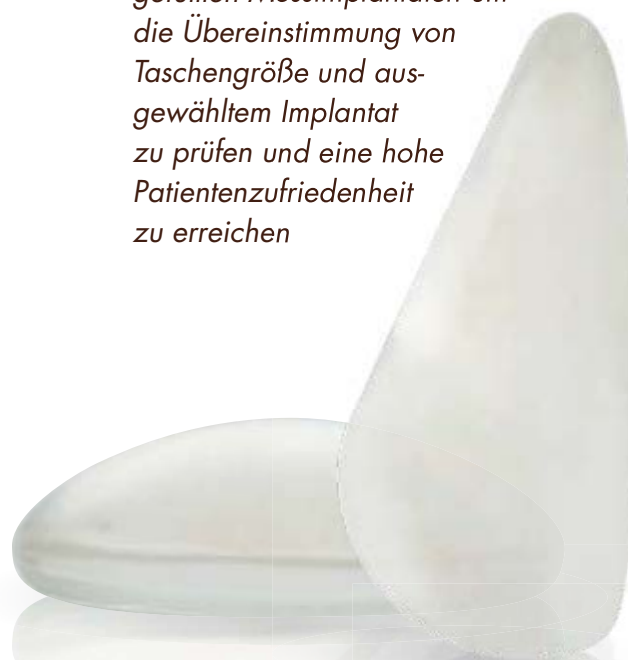

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

THE

Natrelle™

MIT SILIKONGEL GEFÜLLTE MESSIMPLANTATE

COLLECTION

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit



Posterior view

In beiden Formen verfügbar, sowohl **anatomisch** (Natrelle™ 410) als auch **rund** (Natrelle™ INSPIRA™) und stehen in einer breiten Auswahl an Größen zur Verfügung um den chirurgischen Anforderungen gerecht zu werden

sterile Lieferung und gebrauchsfertig †

Konstruiert mit einer **glatten transparenten** Hülle aus Silikonelastomer und mit Silikongel gefüllt

Die Messimplantate werden deutlich gekennzeichnet mit einem **schwarz gedruckten Text** auf der Rückseite

Anatomische Messimplantate haben **Markierungen zur Orientierung**

Zu Verwenden während Brust-Augmentationen oder -Rekonstruktionen um mit ihrer Hilfe während der Operation sicherzustellen, dass Taschengröße und ausgewähltes Implantat ideal übereinstimmen.

Entworfen für die temporäre Platzierung während einer Operation, nicht für eine permanente Implantation. *


†Vorausgesetzt, dass die Resterilisierungs-Anweisungen wie im Produktinformationsblatt (4) benannt ausgeführt werden können, können die die Natrelle™-Auswahl unterstützenden Messimplantate für einen weiteren Gebrauch bis zu 10 Mal resterilisiert werden. Bitte beachten Sie unbedingt die nationalen Vorschriften und Prozeduren für die Resterilisation von Messimplantaten.

*Die Produkt Dimensionen der Messimplantate sind die gleichen wie die der korrespondierenden mit Silikongel gefüllten Natrelle™ Brustimplantaten, die im Produktkatalog enthalten sind.

Auswahl für individuelle Lösungen

103 Optionen für Messimplantate sind verfügbar, entsprechend den am meisten verwendeten Natrelle™ Implantatprofilen und -größen


Messimplantate, die die Natrelle™ 410er Matrix unterstützen

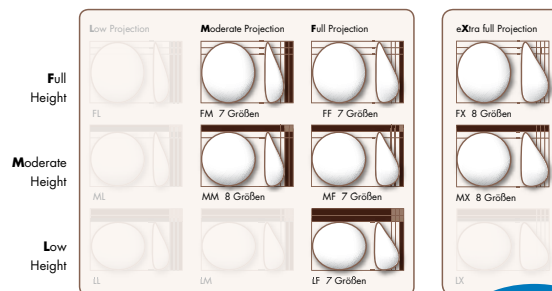

TruForm® (Soft Touch™)

52
Optionen

Messimplantate, die die Natrelle™ INSPIRA™ Matrix unterstützen

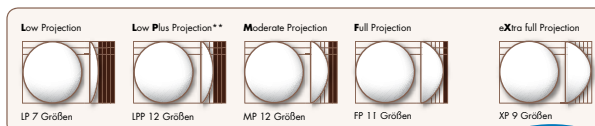

TruForm® (Responsive)

51
Optionen

** Erhältlich ab September 2010

Zufriedenheit mit Natrelle™

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Natrelle™ INSPIRA™

LP Low projection

	TruForm®	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
①	N-SZRL230	230	12.5	2.5
②	N-SZRL260	260	13.0	2.6
③	N-SZRL290	290	13.5	2.7
④	N-SZRL320	320	14.0	2.8
⑤	N-SZRL350	350	14.25	2.9
⑥	N-SZRL380	380	14.5	3.0
⑦	N-SZRL410	410	15.0	3.1

LPP Low Plus projection†

	TruForm®	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
⑧	N-SZRLP145	145	10.0	2.6
⑨	N-SZRLP165	165	10.5	2.7
⑩	N-SZRLP190	190	11.0	2.8
⑪	N-SZRLP205	205	11.25	2.9
⑫	N-SZRLP220	220	11.5	3.0
⑬	N-SZRLP235	235	11.75	3.1
⑭	N-SZRLP250	250	12.0	3.1
⑮	N-SZRLP265	265	12.25	3.2
⑯	N-SZRLP280	280	12.5	3.3
⑰	N-SZRLP300	300	12.75	3.3
⑱	N-SZRLP320	320	13.0	3.4
⑲	N-SZRLP340	340	13.25	3.5

† Erhältlich ab September 2010

MP Moderate projection

	TruForm®	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
⑳	N-SZRM175	175	10.0	3.3
㉑	N-SZRM210	210	10.5	3.5
㉒	N-SZRM240	240	11.0	3.7
㉓	N-SZRM255	255	11.25	3.8
㉔	N-SZRM275	275	11.5	3.9
㉕	N-SZRM295	295	11.75	3.9
㉖	N-SZRM310	310	12.0	4.0
㉗	N-SZRM330	330	12.25	4.1
㉘	N-SZRM345	345	12.5	4.2
㉙	N-SZRM360	360	12.75	4.2
㉚	N-SZRM375	375	13.0	4.3
㉛	N-SZRM405	405	13.25	4.4

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Natrelle™ INSPIRA™

FP Full projection

	TruForm®	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
㉜	N-SZRF220	220	10.0	4.2
㉝	N-SZRF240	240	10.5	4.3
㉞	N-SZRF265	265	11.0	4.5
㉟	N-SZRF295	295	11.25	4.6
㊱	N-SZRF325	325	11.5	4.7
㊲	N-SZRF335	335	11.75	4.8
㊳	N-SZRF345	345	12.0	4.9
㊴	N-SZRF365	365	12.25	5.0
㊵	N-SZRF385	385	12.5	5.1
㊶	N-SZRF415	415	12.75	5.2
㊷	N-SZRF450	450	13.0	5.3

XP eXtra Full projection

	TruForm®	Größe (g)	Durchmesser (cm)	Projektion (cm)
㊸	N-SZRX255	225	10.0	4.8
㊹	N-SZRX285	285	10.5	5.0
㊺	N-SZRX310	310	11.0	5.4
㊻	N-SZRX340	340	11.25	5.5
㊼	N-SZRX375	375	11.5	5.7
㊽	N-SZRX400	400	11.75	5.8
㊾	N-SZRX420	420	12.0	5.9
㊿	N-SZRX445	445	12.25	6.0
㏀	N-SZRX470	470	12.5	6.2

Bitte berücksichtigen Sie, die Zahlen, die zusammen mit dem Volumen von Silikongel-Implantaten genannt werden, sind in Gramm (g) und diese sind vergleichbar mit dem Volumen in cc, das für die gelgefüllten Messimplantate genommen wird, die die Natrelle™ Collection unterstützen.

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Natrelle™ 410

FM Full height/Moderate projection

	TruForm [®]	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
52	N-SZFM180	180	10.0	10.5	3.6
53	N-SZFM205	205	10.5	11.0	3.8
54	N-SZFM235	235	11.0	11.5	4.0
55	N-SZFM270	270	11.5	12.0	4.2
56	N-SZFM310	310	12.0	12.5	4.4
57	N-SZFM350	350	12.5	13.0	4.6
58	N-SZFM395	395	13.0	13.5	4.8

MM Moderate height/Moderate projection

	TruForm [®]	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
59	N-SZMM185	185	10.5	9.6	3.8
60	N-SZMM215	215	11.0	10.1	4.0
61	N-SZMM245	245	11.5	10.6	4.2
62	N-SZMM280	280	12.0	11.1	4.4
63	N-SZMM320	320	12.5	11.6	4.6
64	N-SZMM360	360	13.0	12.1	4.8
65	N-SZMM400	400	13.5	12.5	5.0
66	N-SZMM450	450	14.0	12.9	5.2

Bitte berücksichtigen Sie, die Zahlen, die zusammen mit dem Volumen von Silikongel-Implantaten genannt werden, sind in Gramm (g) und diese sind vergleichbar mit dem Volumen in cc, das für die gelgefüllten Messimplantate genommen wird, die die Natrelle™ Collection unterstützen.

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Natrelle™ 410

FF Full height/Full projection

	TruForm [®]	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
67	N-SZFF185	185	10.0	10.5	4.0
68	N-SZFF220	220	10.5	11.0	4.2
69	N-SZFF255	255	11.0	11.5	4.4
70	N-SZFF290	290	11.5	12.0	4.6
71	N-SZFF335	335	12.0	12.5	4.8
72	N-SZFF375	375	12.5	13.0	5.1
73	N-SZFF425	425	13.0	13.5	5.2

MF Moderate height/Full projection

	TruForm [®]	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
74	N-SZMF195	195	10.5	9.6	4.2
75	N-SZMF225	225	11.0	10.1	4.4
76	N-SZMF255	255	11.5	10.6	4.6
77	N-SZMF335	335	12.5	11.6	5.1
78	N-SZMF375	375	13.0	12.1	5.2
79	N-SZMF420	420	13.5	12.5	5.3
80	N-SZMF470	470	14.0	12.9	5.6

LF Low height/Full projection

	TruForm [®]	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
81	N-SZLF175	175	10.5	8.6	4.2
82	N-SZLF205	205	11.0	9.1	4.4
83	N-SZLF240	240	11.5	9.6	4.6
84	N-SZLF270	270	12.0	10.1	4.8
85	N-SZLF310	310	12.5	10.5	5.1
86	N-SZLF390	390	13.5	11.4	5.3
87	N-SZLF440	440	14.0	11.8	5.6

Bitte berücksichtigen Sie, die Zahlen, die zusammen mit dem Volumen von Silikongel-Implantaten genannt werden, sind in Gramm (g) und diese sind vergleichbar mit dem Volumen in cc, das für die gelgefüllten Messimplantate genommen wird, die die Natrelle™ Collection unterstützen.

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate – Natrelle™ 410

FX Full height/eXtra Full projection

TruForm®	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
88 N-SZFX185	185	9.5	10.0	4.6
89 N-SZFX215	215	10.0	10.5	4.9
90 N-SZFX245	245	10.5	11.0	5.1
91 N-SZFX280	280	11.0	11.5	5.3
92 N-SZFX315	315	11.5	12.0	5.5
93 N-SZFX360	360	12.0	12.5	5.7
94 N-SZFX410	410	12.5	13.0	6.0
95 N-SZFX450	450	13.0	13.5	6.1

MX Moderate height/eXtra Full projection

TruForm®	Größe (g)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
96 N-SZMX195	195	10.0	9.1	4.9
97 N-SZMX225	225	10.5	9.6	5.1
98 N-SZMX255	255	11.0	10.1	5.3
99 N-SZMX290	290	11.5	10.6	5.5
100 N-SZMX325	325	12.0	11.1	5.7
101 N-SZMX370	370	12.5	11.6	6.0
102 N-SZMX410	410	13.0	12.1	6.1
103 N-SZMX445	445	13.5	12.5	6.2

Bitte berücksichtigen Sie, die Zahlen, die zusammen mit dem Volumen von Silikongel-Implantaten genannt werden, sind in Gramm (g) und diese sind vergleichbar mit dem Volumen in cc, das für die gelgefüllten Messimplantate genommen wird, die die Natrelle™ Collection unterstützen.

THE

Natrelle™ 133

Natrelle™

ANATOMISCHE GEWEBEEXPANDER

COLLECTION

Eine Option zur zweizeitigen
Rekonstruktion – Signifikante und
kontrollierte Gewebeexpansion



Einzigartige Frauen verdienen
individuelle Lösungen

THE


Natrelle™

COLLECTION

Natrelle™ 133

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit

Vertrauen in Qualität

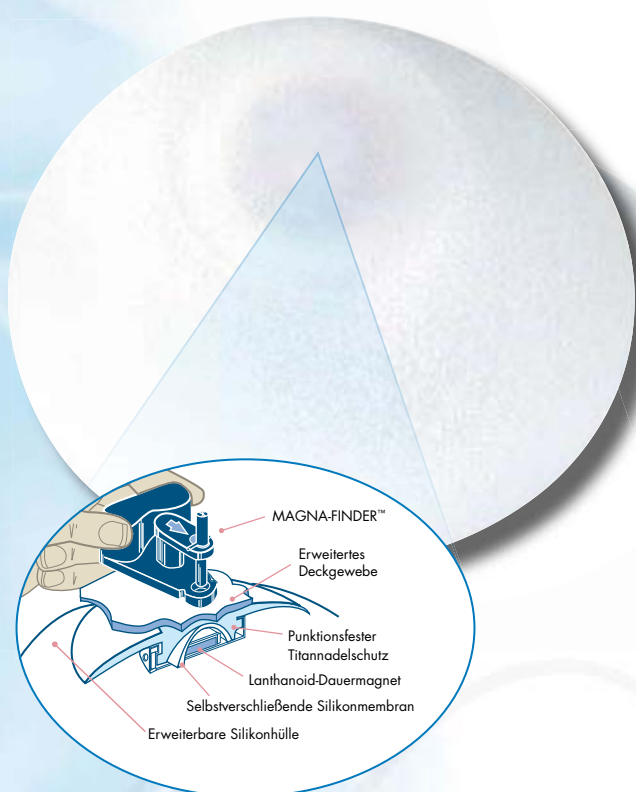

- Die anatomische Form und eine stabile Basis sorgen für eine unidirektionale Expansion und ein natürliches Aussehen¹²
- Vollständige BIOCELL™-Texturierung für exzellente Ergebnisse¹²
 - Behalten ihre Lage bei, unterstützen eine ästhetische, ansprechende Expansion¹²
 - Bilden eine nicht kontraktile Weichteildeckung für das Implantat¹³
- MAGNA-SITE™ ist ein präzises und leicht anzuwendendes integriertes Injektionssystem

Technisch einfaches Verfahren und leicht reproduzierbare Ergebnisse¹² führen zu kurzer Operationsdauer und sehr kurzem Krankenhausaufenthalt¹³

- Wenige Komplikationen und hohe Patientenzufriedenheit¹²
- Einfache Expansion und geringe Schmerzen¹³

Für langfristige Patientenzufriedenheit

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

THE

Natrelle™

COLLECTION

Natrelle™ 133

Qualität • Auswahl • Zufriedenheit

Eine Lösung für individuelle Ergebnisse

Direkte Kompatibilität zu den Natrelle™ 410 und 510 Implantaten

Natrelle™ 133
Implantatformen

Full Height
FV

Moderate Height
MV

Low Height
LV
SV

Natrelle™ 133
Variable Projection

FV - 6 Größen

MV - 6 Größen

LV/SV - 6 Größen

Natrelle™ 133XP
Implantatformen

Full Height
FX

Moderate Height
MX

Low Height
SX

Natrelle™ 133XP
eXtra Full Projection

FX - 6 Größen

MX - 6 Größen

SX - 6 Größen

7 Styles
42 Optionen

Natrelle™ 410

Low Projection	Moderate Projection	Full Projection
FL	FM	FF
ML	MM	MF
LL	LM	LF

Natrelle™ 410
eXtra Full Projection

FX

MX

LX

Natrelle™ 510
eXtra Full Projection

FX

MX

LX

Natrelle™ 133 Anatomische Gewebeexpander Zweizeitig

FV Full height/Variable projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133FV11	300	11.0	11.5	5.0
N-67-133FV12	400	12.0	12.5	5.3
N-67-133FV13	500	13.0	13.5	5.7
N-67-133FV14	600	14.0	14.5	6.2
N-67-133FV15	750	15.0	15.5	6.7
N-67-133FV16	850	16.0	16.5	6.8

MV Moderate height/Variable projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133MV11	250	11.0	10.0	4.9
N-67-133MV12	300	12.0	11.0	5.2
N-67-133MV13	400	13.0	12.0	5.6
N-67-133MV14	500	14.0	13.0	6.0
N-67-133MV15	600	15.0	14.0	6.3
N-67-133MV16	700	16.0	15.0	6.6

LV Low height/Variable projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Höhe Intra Arc	Projektion (cm)
N-67-133LV11	150	11.0	7.6	7.0	4.7
N-67-133LV12	200	12.0	8.4	7.5	5.3
N-67-133LV13	300	13.0	9.1	8.0	5.7
N-67-133LV14	350	14.0	9.7	8.5	6.0
N-67-133LV15	400	15.0	10.5	9.0	6.3
N-67-133LV16	500	16.0	11.3	9.5	6.3

SV Short height/Variable projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133SV11	200	11.0	7.6	4.7
N-67-133SV12	250	12.0	8.4	5.3
N-67-133SV13	300	13.0	9.1	5.7
N-67-133SV14	375	14.0	9.7	6.0
N-67-133SV15	450	15.0	10.5	6.3
N-67-133SV16	550	16.0	11.3	6.3

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die *Natrelle™*-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ 133 Anatomische Gewebeexpander Zweizeitig

FX Full height/eXtra-full projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133FX11	350	11.0	11.5	5.9
N-67-133FX12	450	12.0	12.5	6.3
N-67-133FX13	550	13.0	13.5	6.7
N-67-133FX14	650	14.0	14.5	7.1
N-67-133FX15	800	15.0	15.5	7.6
N-67-133FX16	950	15.5	16.0	8.1

MX Moderate height/eXtra-full projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133MX11	300	11.0	10.0	5.9
N-67-133MX12	400	12.0	11.0	6.3
N-67-133MX13	500	13.0	12.0	6.7
N-67-133MX14	600	14.0	13.0	7.1
N-67-133MX15	700	15.0	14.0	7.6
N-67-133MX16	850	15.5	14.5	8.1

SX Short height/eXtra-full projection

Katalog #	Empfohlene Füllmenge (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)
N-67-133SX11	250	11.0	9.0	5.9
N-67-133SX12	350	12.0	10.0	6.3
N-67-133SX13	400	13.0	11.0	6.7
N-67-133SX14	500	14.0	12.0	7.1
N-67-133SX15	650	15.0	13.0	7.6
N-67-133SX16	800	15.5	13.5	8.1

MAGNA-FINDER™ Siehe Abbildung auf Seite 40

Katalog #	Einheit
N-30-00004 MAGNA-FINDER™	One

Anatomische Gewebeexpander-Schablone

Katalog #	Einheit
N-30-00017 <i>Natrelle™</i> 133 FV / MV / LV Schablonen für Messimplantate	Set

Nenngrößen

Die Expandermaße werden bei empfohlener Füllmenge auf einer ebenen Oberfläche gemessen. Hinweis: nicht jeder Expander entspricht exakt den angegebenen Maßen. Leichte Abweichungen können auftreten.

Warnung: Der starke Lanthanoid-Dauermagnet dieser Vorrichtung ist kontraindiziert, wenn das Magnetfeld andere Vorrichtungen, wie z.B. Herzschrittmacher, Vorrichtungen zur Medikamentenabgabe, künstliche Sensoren und ähnliche Produkte sowie Magnetresonanz-Verfahren beeinträchtigen könnte. In-Vitro-Tests zeigen, dass MAGNA-FINDER™ durch 60mm Phantom-Gewebe feststellbar ist.

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die *Natrelle™*-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

THE

Natrelle™ 150

Natrelle™

ANATOMISCHE PERMANENTEXPANDER

COLLECTION

Option für die einzeitige Brustrekonstruktion, die es ermöglicht, eine optimale Brustform mit nur einem Eingriff zu erreichen¹⁴




Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Vertrauen in Qualität



MRT-
kompatibel


- Anatomisches Design für eine natürlichere Brustform^{14, 15}
- BIOCELL™-Texturierung verringert das Rotationsrisiko und trägt zu einer geringen Kapselkontrakturrate bei¹⁴
- 360° INTRASHIEL™ Barrierschicht minimiert die Diffusion von Silikongel⁶
- Stabile Basis führt zu einer unidirektionalen Expansion und zu einem natürlicheren Aussehen
- Eine mit Silikongel gefüllte äußere Kammer, die eine mit Kochsalzlösung auffüllbare innere Kammer umhüllt, vereint die Flexibilität eines Expanders mit dem Aussehen und der Konsistenz eines Silikongelimplantates.

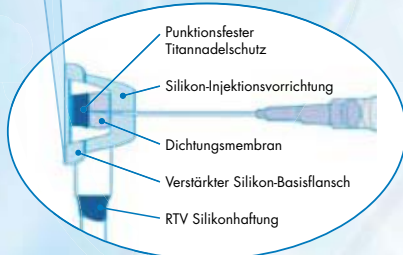

- Mini-Remote-Port
- Ermöglicht die zuverlässige und langfristige Anpassung des Ergebnisses
- Minimiert das Risiko einer Leckage
- Optionaler Füllschlauch mit Verschlussstößel zum Abdichten des Füllschlauchs für zufriedenstellende Expansion und Entfernung des Remote-Ports

Eine Lösung für individuelle Ergebnisse

- 2 Höhenoptionen für eine kontrollierte Fülle des oberen Pols
- Regulierbare innere Kammer für eine flexible Kontrolle des unteren Brustpols

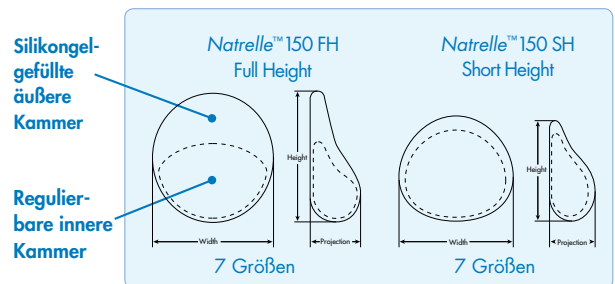

Natrella™ 150 anatomische Permanentexpander ermöglichen hervorragende Ergebnisse mit ansprechender Brustform und wenigen Komplikationen^{14, 15}

Für langfristige Patientenzufriedenheit

Einzigartige Frauen verdienen individuelle Lösungen

Natrelle™ 150 Anatomische Permanentexpander Einzeitig

FH	Full Height					
Katalog #	Größe (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)	Gel-Füllung (g)	Kochsalz-lösung (cm³)
N-27-150231	230-250	10.5	11.5	4.6-5.5	115	115-135
N-27-150281	280-300	11.5	12.5	5.0-5.6	140	140-160
N-27-150351	350-370	12.0	13.0	5.3-6.0	175	175-195
N-27-150431	430-455	13.0	14.0	5.6-6.2	215	215-240
N-27-150521	520-550	14.0	15.0	6.0-6.8	260	260-290
N-27-150621	620-660	15.0	16.0	6.0-6.8	310	310-350
N-27-150721	720-760	16.0	17.0	6.1-7.1	360	360-400

SH	Short Height					
Katalog #	Größe (cm³)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Projektion (cm)	Gel-Füllung (g)	Kochsalz-lösung (cm³)
N-27-150136	135-145	9.5	8.0	4.2-4.8	45	90-100
N-27-150166	165-175	10.5	8.5	4.2-4.8	65	100-110
N-27-150236	235-255	11.5	9.5	4.7-5.7	85	150-170
N-27-150296	295-315	12.5	10.5	4.8-5.8	100	195-215
N-27-150386	385-405	13.5	11.5	5.2-6.2	125	260-280
N-27-150496	495-520	14.5	12.5	5.6-6.6	170	325-350
N-27-150626	625-655	16.0	14.0	5.9-6.9	215	410-440

Schablone für Anatomische Permanentexpander

Katalog #	Einheit
N-30-00015	Natrelle™ 150 Schablone für Messimplantate Set

Set zum Einsetzen des Silikonpfropfens

Katalog #	Einheit
N-30-00019	Set zum Einsetzen des Silikonpfropfens 1


Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Natrelle™ 168 & Natrelle™ 468 Mit Kochsalzlösung gefüllte Implantate

Die Natrelle™ 168 und Natrelle™ 468 Brustimplantate erzeugen ein natürliches Aussehen für Patientinnen, die Implantate mit Kochsalzlösung wünschen.

Natrelle™ 168

BIOCELL™-Texturierung, mit Kochsalzlösung gefüllte runde Brustimplantate mit Membranventil anterior, moderate Projektion

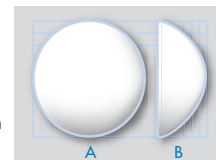


168 Mit Kochsalzlösung gefüllte runde Implantate *

Katalog #	Füllung (cm³)	Durchmesser A (cm)	Projektion B (cm)
N-27-168121	120-150	9.0	3.0
N-27-168151	150-180	9.6	3.3
N-27-168181	180-210	10.2	3.4
N-27-168211	210-240	10.6	3.7
N-27-168241	240-270	11.1	3.8
N-27-168271	270-300	11.6	3.9
N-27-168301	300-330	11.9	4.1
N-27-168331	330-360	12.3	4.2
N-27-168361	360-390	12.7	4.2
N-27-168391	390-420	13.0	4.5
N-27-168421	420-450	13.4	4.5
N-27-168451	450-480	13.7	4.6
N-27-168481	480-510	14.1	4.6
N-27-168511	510-540	14.4	4.6

Natrelle™ 468

BIOCELL™-Texturierung, mit Kochsalzlösung gefüllte anatomische Brustimplantate mit Membranventil anterior

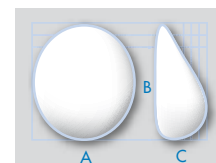

468 Mit Kochsalzlösung gefüllte anatomische Implantate *

Katalog #	Empfohlene Füllung (cm³)	Breite A (cm)	Höhe B (cm)	Projektion C (cm)
N-27-468196	195-205	10.0	10.5	4.0
N-27-468231	230-240	10.5	11.0	4.2
N-27-468271	270-285	11.0	11.5	4.3
N-27-468301	300-315	11.5	12.0	4.6
N-27-468351	350-370	12.0	12.5	4.8
N-27-468381	380-400	12.5	13.0	4.9
N-27-468451	450-470	13.0	13.5	5.3
N-27-468496	495-520	13.5	14.0	5.5
N-27-468561	560-590	14.0	14.5	5.7
N-27-468621	620-650	14.5	15.0	5.9

* Made to order

Beil allen Produkt-Codes, denen ein "N"-Präfix voran gestellt ist, können Kunden weiterhin ohne das neue "N"-Präfix bestellen - die Natrelle™-Verpackungen enthalten das "N"-Präfix genauso wie auch die in Rechnung gestellten Produkt-Codes.

Mit Silikongel gefüllte Messimplantate⁸ – Instruktionen für die Wiederaufbereitung:

Bitte verwenden Sie die Messimplantate als Einmalprodukte, wenn das hier beschriebene Wiederaufbereitungsverfahren in Ihrer Klinik / Praxis nicht umsetzbar ist.

Reinigungsprozedur

Die mit Silikongel gefüllten resterilisierbaren Messimplantate direkt nach der Anwendung mit der Hand für mindestens fünfzehn (15) Minuten mit einem anionischen enzymatischen Reinigungsmittel, entsprechend einer 2 % Multi-Terge™ **, Lösung waschen, diese nach jedem Gebrauch entsorgen. Abspülen mit fließendem warmen, entionisiertem Wasser (zwischen 37° C und 43° C) für mindestens eine (1) Minute um Rückstände zu entfernen.

Desinfektion

Nach der Reinigung mit einer Glutaraldehyd-Lösung in einer Konzentration von 2-3,4 % (d.h. Cidex® **oder entsprechend**) desinfizieren. Das Medizinprodukt für mindestens 60 Minuten in die Lösung eintauchen. Die Desinfektionslösung nach jedem Gebrauch entsorgen. Abspülen mit fließendem entionisiertem Wasser für mindestens eine (1) Minute. Das Medizinprodukt bis zur Autoklavierung in einem dicht schließenden sterilen Behälter lagern.

Sterilisationsverfahren (inkl. Prionen-Verfahren)

Das doppelt in geeignetes Autoklavierungsvlies, wie z.B. eine CSR-Sterilisierungshülle, eingewickelte Messimplantat in den Autoklaven legen und vor einer weiteren Wiederverwendung nach folgendem Autoklavierungsablauf aufbereiten:

Schwerkraftverschiebung Ablauf:

Temperatur: 134 +/-0°C

Dauer: mindestens achtzehn (18) Minuten

HINWEIS: Benutzen Sie kein Impuls-Vakuum oder keinen Pre-Vakuum Autoklavierungsablauf, weil dieses den Sizer beschädigen könnte.

Das Messimplantat muss vernichtet und darf nach Gebrauch nicht mehr verwendet werden, wenn der Patient Verdacht auf Creutzfeld-Jakob-Erkrankung oder einen Risikofaktor wie z.B. eine vorherige Behandlung mit menschlichen Wachstumshormonen, eine neurologische Operation, oder eine genetische Historie (familiäre CJD) hat.

Der oben beschriebene Sterilisierungsablauf wurde als erfolgreich beschrieben, wenn das Verhältnis Gewicht der zu resterilisierenden Sizer in g zu Volumen der Autoklavenkammer nicht 7100 g/m³ übersteigt. Beispiele für die Relation Gewicht in g zu Volumen der Autoklavenkammer sind:

Maximales Gesamtgewicht der Messimplantate	Volumen des Autoklaven
3600 g	0,51m ³
2700 g	0,41m ³
1800 g	0,31m ³

Das Messimplantat im Autoklaven trocknen lassen bis die äußere Hülle komplett trocken ist. Keinen vakuumgestützten Trockenlauf verwenden. Das eingewickelte Produkt in einem bedeckten Behälter lagern, um das Entstehen von Luftverunreinigungen zu minimieren. Die resterilisierbaren Messimplantate müssen nach der Sterilisation und vor der nachfolgenden Wiederverwendung komplett abgekühlt sein.

Nach dem Autoklavierungsprozess können Luftblasen im Gel sein. Diese Blasen beeinträchtigen die Integrität oder den Zweck des Gelsizers nicht.

Lagerung

Das eingewickelte und autoklavierte Produkt bis zu seinem Einsatz in einem dicht schließenden und sterilen Behälter lagern. Das Messimplantat unbedingt innerhalb von 30 Tagen nach der Autoklavierung wiederverwenden.

The Natrelle™ Collection – Wichtige Information

Natrelle™ Brustimplantate und Gewebeexpander sind latexfrei.

Die Medizinprodukte aus Silikongel in diesem Katalog werden nicht in Ländern verkauft, in denen derzeit Restriktionen vorliegen.

Bitte beziehen Sie sich auf die Verpackungsbeilage, die mit jedem Medizinprodukt zur Verfügung gestellt wird für Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Gebrauchshinweise, limitierter Garantie, sowie Patienten-, Arzt- und Herstellerinformationen.

Nenngrößen: Die Maße der Medizinprodukte werden auf einer ebenen Oberfläche gemessen. Nicht jedes Medizinprodukt entspricht exakt den angegebenen Maßen, leichte Abweichungen können auftreten.

*Vorausgesetzt, dass die Resterilisierungs-Anweisungen wie im Produktinformationsblatt (4) benannt ausgeführt werden können, können die die Natrelle™-Auswahl unterstützenden Messimplantate für einen weiteren Gebrauch bis zu 10 Mal resterilisiert werden. Bitte beachten Sie unbedingt die nationalen Vorschriften und Prozeduren für die Resterilisation von Messimplantaten.

**entsprechend in Deutschland u.a. Sekusept oder Sekumatic

Literatur:

1. Allergan Market Research . Data on File, May 2007
2. Spear S L, Hedén P, (2007). Allergan's silicone gel breast implants. *Expert Rev. Med. Devices.* 4(5), 699-708
3. Danino A M, *et al* (2001). Comparison of the Capsular Response to the Biocell RTV and Mentor 1600 Siltex Breast Implant Surface Texturing: A Scanning Electron Microscopic Study. *Plast. Reconstr. Surg.* 108(7), 2047-2052
4. Bengtson B P, *et al* (2007). Style 410 Highly Cohesive Silicone Breast Implant Core Study Results at 3 Years. *Plast. Reconstr. Surg.* 120(1), 40-48S
5. Brown M H, *et al* (2005). Cohesive Silicone Gel Breast Implants in Aesthetic and Reconstructive Breast Surgery. *Plast. Reconstr. Surg.* 116(3) 768-779
6. Allergan. Data on File.
7. Adams W (2007). Form-Stable Cohesive Gel Implants: Advantages and Technical Essentials. *Innovations in Plastic Surgery.* 1(3), 7-14
8. Re-Sterilizable Breast Implant Sizers PID (L3461 Rev. 01; 06/2009)
9. Hedén P, *et al* (2006). Style 410 Cohesive Silicone Breast Implants: Safety and Effectiveness at 5 to 9 Years after Implantation. *Plast. Reconstr. Surg.* 118(6), 1281-1287
10. Hedén P, *et al* (2009). Long-Term Safety and Effectiveness of Style 410 Highly Cohesive Silicone Breast Implants. *Aesth Plast Surg.* 33, 430-436
11. Nipshagen MD *et al*. Anatomically shaped breast prosthesis in vivo: A change of dimension? *Aesthetic Plastic Surgery* 2007;31:540-543
12. McGeorge D D, *et al* (1996). Breast reconstruction with anatomical expanders and implants: our early experience. *British Journal of Plastic Surgery.* 49, 352-357
13. Maxwell G P, Falcone P A, (1992). Eighty-Four Consecutive Breast Reconstructions Using a Textured Silicone Tissue Expander. *Plast. Reconstr. Surg.* 89(6), 1022-1036
14. Gui G P H, *et al* (2003). Immediate Breast Reconstruction Using Biodimensional Anatomical Permanent Expander Implants: A Prospective Analysis of Outcome and Patient Satisfaction complications. *Plast. Reconstr. Surg.* 111(1), 125-138
15. Salgarello M, *et al* (2004). Immediate Breast Reconstruction With Anatomical Permanent Expandable Implants After Skin-Sparing Mastectomy: Aesthetic and Technical Refinements. *Annals of Plastic Surgery.* 52(4), 358-364



 Allergan
Marlow International
Parkway
Marlow
Bucks
SL7 1YL
United Kingdom

Deutsche Niederlassung:
Pharm-Allergan GmbH
Pforzheimer Str. 160
76275 Ettlingen

Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte auch: www.natrelle.de

Gebührenfreie Hotline:
Tel: 0800 673 8207
Fax: 0800 673 8208

™ „Warenzeichen sind Eigentum
von Allergan Inc
© Copyright Allergan Inc. 2010

